

Athrodesenstuhl



Mit unseren Athrodesenstühlen haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Sitzhaltung.

- Ultra sanfte Wippfunktion mit stufenloser Arretierung.
- Einfache und bequeme Einstellung durch leicht erreichbare Einstellhebel direkt an Ihrer Seite.
- Kugelgriffe für ein „fingerleichtes“ Anheben, die durch ihre einzigartige Gestaltung der natürlichen Bewegung der Hand folgen
- Innovative Polsterausgestaltung gewährleistet eine maximale Unterstützung im Hüft- und Lumbalbereich und sorgt damit für außerordentlichen Komfort
- Optional auch für Linkshänder

Kopfstütze (optional)

Z-Rest +ZR (hier abgebildet) oder Nackenstütze +NR
Höhenverstellung (bis zu 12 cm)
Winkerverstellung (-80° vorwärts bis +120° nach hinten)
Festigkeit einstellbar in Höhe und Winkel



Opera 66 mit Z-Rest, Lumbalstütze Schukra,
geteiltem Sitz SSPM und Fußkreuz chrom (BAP6)

Geteilte Sitzfläche

Einzigartiges Design zur Unterstützung des Beckens und zur Vermeidung von Taubheit.

Verstellbare Schukra Lumbalunterstützung

Dieses optionale Feature gibt es je nach Körpergröße in unterschiedlichen Größen (+LS2, +LS3, +LS4)
Tiefen-/Stärkeneinstellung bis zu 4cm
Zusätzliche Höhenverstellung als Option erhältlich (+LSH bis zu 10cm)



Zentraler Wipppunkt

Der Wippunkt befindet sich in der Sitzmitte über der Säule. Lässt sich stufenlos arretieren.

Geteilte Sitzfläche ist in drei Größen verfügbar

Code: **SSPS** (kurz).
43cm tief x 46cm breit.

Code: **SSPM** (mittel).
48cm tief x 46cm breit.

Code: **SSPL** (lang).
51cm tief x 48cm breit.



Athrodesenstuhl

Bewegung und Justierung



Kugelgriffe

Anordnung in einer leicht erreichbaren Dreierreihe, die sich bequem aus der Sitzhaltung heraus bedienen lässt. Die eindeutige Kennzeichnung erleichtert die korrekte Bedienung. Standardmäßig mit silbernen soft-touch Kugelgriffen, optional chromfarbene Kugelgriffe.



Wippsfunktion/Sitzneigung

Frei schwingend oder stufenlos arretierbar (+8° rückwärts bis -6° vorwärts). Drehpunkt sitzt genau über der Gasfeder. Je nach Körpergewicht individuell einstellbare Wippspannung.

Rückenlehne-Winkeleinstellung

Die Form der Rückenlehne ist auf unterschiedliche Körpergrößen abgestimmt; für eine korrekte Unterstützung im Hüft- und Lumbalbereich. Verstellbar in jedem Winkel: (+15° rückwärts bis -10° vorwärts). Einstellbare Luftzellen-Lordosenstütze als Standardausstattung.

Rückenlehne-Höhenverstellung

Höhe bis zu 10cm verstellbar.

Sitztiefenverstellung

Verstelltiefe 5cm für die Modelle: 61, 62 und 64.

Verstelltiefe 6cm für die Modelle: 65 und 66.




Armlehnen

AMP10 Armlehnen (optional): multi-positionale Armauflagen in schwarz. Höhenverstellbar bis 10cm. Weitenverstellung bis 4cm auf jeder Seite mit Hilfe eines Hebels. Leicht zu entfernen oder auszuwechseln.



Falls besonders kurze Armlehnen erforderlich sind, lassen sich diese auch umgekehrt montieren. Code AMP10REV.

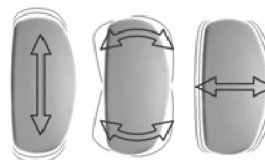

Armauflagen

Die AMP10 Armauflagen haben eine Rastvorrichtung mit 6 Einrastpunkten nach vorne, sowie 5 zur Seite und in der Rotation. Durch eine 180°-Rotation lässt sich die „D-Form“ nach außen und innen ausrichten. Sie rasten ein wenn sie gerade stehen.



Falls besonders kurze Armlehnen erforderlich sind, lassen sich diese auch umdrehen.



Welche Stuhlgröße ist die Richtige?

Um eine Optimale Lösung für Ihre Anliegen und Bedürfnisse zu finden, bitten wir Sie, den POSE-Kundendetailbogen in unserem Download-Bereich auszufüllen. Gerne erstellen wir Ihnen dann ein individuelles Angebot.